



Provicol®

EUGENOLFREIER, TEMPORÄRER
BEFESTIGUNGSZEMENT MIT CALCIUMHYDROXID

Provicol®

INTERNATIONAL BEWÄHRT. SEIT JAHREN.

Die Ansprüche an ein temporäres Befestigungsmaterial sind hoch. Natürlich soll die Restauration gut und sicher halten, sodass sie einem Patienten nicht herausfällt. Gleichzeitig soll sie aber auch leicht und unbeschädigt wieder entfernt werden können.

Die Produkte aus der Provicol-Familie ermöglichen beides. Erweitert wird die Reihe der bewährten Materialien Provicol, Provicol QM und Provicol C nun durch das neue Provicol QM Plus. Dieses bringt die gleichen Eigenschaften und Vorzüge mit, die jedes der Provicol-Produkte auszeichnen, bietet zusätzlich aber eine noch stärkere Haftung.

Alle Provicol-Produkte überzeugen mit diesen Vorteilen

- Es lassen sich viele Arten von temporären Befestigungen durchführen
- Sie sind eugenolfrei und somit ideal für den Einsatz vor der adhäsiven Befestigung mit Compositematerial geeignet
- Sie enthalten Calciumhydroxid. Calciumhydroxid fördert die Bildung von Tertiärdentin und wirkt bakteriostatisch
- Die Überschussentfernung funktioniert unkompliziert und schnell

Provicol® QM – Haftet wenn man´s braucht

Durch die QuickMix-Spritze ist Provicol QM schnell in der Anwendung, ermöglicht fehler- und blasenfreies Anmischen und kann direkt auf Zahn und Werkstück appliziert werden.



Provicol® – Bewährt in der Tubenvariante

Das temporäre Befestigungsmaterial ist auch in Tuben als Handmischvariante erhältlich.



Provicol® C – Für den Mehrgebrauch in der Kartusche

In der wirtschaftlichen 65 g-Kartusche bietet Provicol C eine schnelle Anwendung und direkte Applikation bei fehler- und blasenfreiem Anmischen.




Provicol® QM Plus

MIT DEM PLUS AN HAFTUNG

Provicol QM Plus ist das jüngste „Familienmitglied“, aber auch das stärkste: Dank seiner höheren Festigkeit ist es optimal geeignet für Befestigungssituationen, in denen mehr Haftung verlangt wird: zum Beispiel bei der Befestigung auf kurzen und / oder kleinen Zahnstümpfen sowie bei einer zu geringen Retention zwischen dem Provisorium und dem Zahnstumpf.

Sie haben die Wahl

Die Haftung je nach Situation auswählen: Das bietet Ihnen das Set, welches aus zwei QuickMix Spritzen Provicol QM und einer QuickMix Spritze Provicol QM Plus besteht. So haben Sie für den jeweils vorliegenden klinischen Fall das jeweils richtige temporäre Befestigungsmaterial in der Praxis bereit.

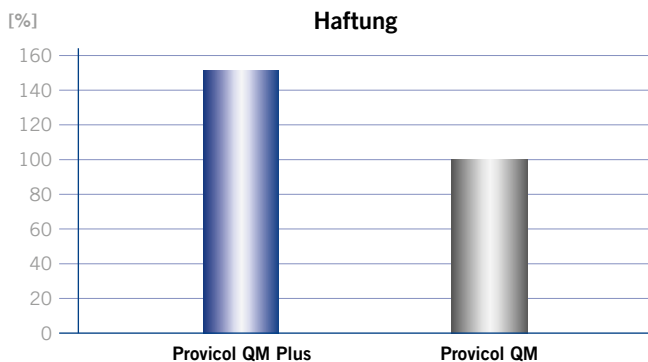

Im Vergleich zu Provicol QM hat Provicol QM Plus eine um 51% höhere Haftkraft.

Quelle: Interne Messung



Klinischer Fall



Die geringe Filmdicke von Provicol QM Plus gewährleistet eine stets passgenaue Eingliederung und die optimale Fließfähigkeit macht die Zementierung denkbar einfach. Nach der Eingliederung wird das Material auf den Punkt standfest.

Provicol®

EUGENOLFREIER, TEMPORÄRER BEFESTIGUNGSZEMENT MIT CALCIUMHYDROXID

Indikationen

Temporäre Befestigung von provisorischen Restaurationen (Kronen, Brücken, Inlays und Onlays)

Temporäre Befestigung von definitiven Restaurationen (Kronen, Brücken, Inlays und Onlays)

Temporärer Verschluss kleiner einflächiger Kavitäten

Handelsformen

Provicol® QM

REF 1074 QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör

Provicol® QM Plus

REF 1098 QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör

REF 1099 Set QuickMix Spritze 3 × 5 ml
(2 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus),
Zubehör

REF 2261 Dispenser – QuickMix

REF 2189 Mischkanülen Typ 10, 50 Stk.

Provicol® C

REF 1076 Kartusche 2 × 65 g, Zubehör

REF 2158 Dispenser – Typ 2

REF 2185 Mischkanülen Typ 6, 50 Stk.

Provicol®

REF 1075 Tube 2 × 25 g (Basis / Katalysator)

Vorteile

- Geringe Filmdicke für eine stets passgenaue Eingliederung
- Optimale Fließfähigkeit für eine einfache Zementierung
- Auf den Punkt standfest für eine präzise Überschussentfernung
- Eugenolfrei: kein Einfluss auf die Aushärtung und die Eigenschaften von Compositematerialien
- Enthält Calciumhydroxid und Zinkoxid
 - Calciumhydroxid fördert die Bildung von Tertiärdentin und wirkt bakteriostatisch
 - Zinkoxid ist bekannt für seine antibakterielle Wirkung

Weitere Vorteile von Provicol® QM Plus

- Erhöhte Festigkeit für mehr Retention und sicheren Halt
- Hohe Röntgenopazität



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch: